

# Clearblue® PLUS

- Clearblue® PLUS tiene una precisión superior al 99 % a partir de la fecha en que debía tener el período.
- Clearblue® PLUS puede usarse hasta 4 días antes de la ausencia del período.

Lea este folleto con atención antes de realizar la prueba.

## Prueba de Embarazo

### Antes de comenzar

Cuando realice la prueba, puede ser útil que tenga a mano un reloj.

#### 1 REALICE LA PRUEBA

Si realiza la prueba a partir de la fecha en la que debía tener el período, puede realizarla en cualquier momento del día. Si realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período, utilice la primera orina del día.

Cuando esté lista para realizar la prueba, retire la varilla de prueba del envoltorio y extraiga la tapa azul. Utilice la varilla de prueba de inmediato.


#### REALICE LA PRUEBA EN EL CHORRO DE URINA

Puede realizar la prueba directamente en el chorro de orina o en una muestra de orina recolectada en un recipiente limpio y seco.

- Sostenga la punta que cambia de color hacia abajo en el chorro de orina o en la muestra de orina recolectada, como se muestra, durante **5 segundos**.
- La punta que cambia de color rápidamente se pondrá de color rosa, lo que demuestra la



absorción de la orina. **Debe sostener la punta que cambia de color en la orina durante los 5 segundos completos.**

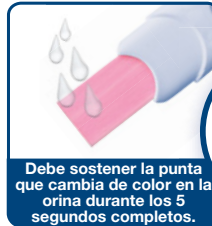

Debe sostener la punta que cambia de color en la orina durante los 5 segundos completos.

5 segundos



Comience a controlar los 5 segundos apenas note que la punta que cambia de color se vuelve rosa.

Chorro de orina Muestra recolectada

- Mantenga la punta que cambia de color hacia abajo o apoye la varilla de prueba en una superficie plana hasta que esté lista para leer el resultado y haya aparecido una línea azul en la ventana de control.
- Quizás desee volver a colocar la tapa.

Consulte la **pregunta 7** si la punta que cambia de color no se volvió completamente rosa.

2 **3 minutos**

**ESPERE 3 MINUTOS** A medida que la prueba comience a funcionar, observará la formación de una o más líneas azules.

#### 3 VEA EL RESULTADO


Puede leer el resultado en la ventana de resultado.

**Cuando lea el resultado, debe haber una línea azul en la ventana de control. Esta línea demuestra que la prueba ha funcionado.**

El resultado de "Embarazada" puede aparecer en 1 minuto si realiza la prueba a partir de la fecha en la que debía tener el período (es decir, la fecha posterior al día en que debía tener el período, pero no lo tuvo).

Debe esperar 3 minutos completos para confirmar un resultado de "No embarazada" o si realiza la prueba antes de la fecha en la que debe tener el período (consulte la **pregunta 11**).

Si en **10 minutos** no aparece la línea azul en la ventana de control, significa que la prueba no ha funcionado (consulte la **pregunta 8**).

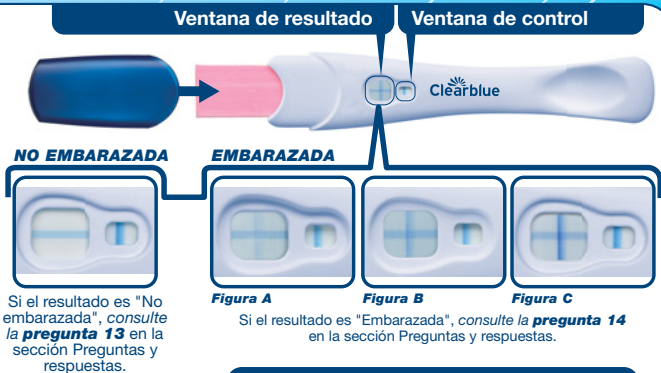

Si el resultado es "No embarazada", consulte la **pregunta 13** en la sección Preguntas y respuestas.

Si el resultado es "Embarazada", consulte la **pregunta 14** en la sección Preguntas y respuestas.

**No importa si una de las líneas que forma el símbolo "+" es más clara o más oscura que la otra: el resultado es "Embarazada".**

**¡IMPORTANTE!** Lea el resultado dentro de los **10 minutos** posteriores a la realización de la prueba. No tome en cuenta ningún cambio en el resultado después de este plazo.

Si aún tiene dudas sobre el resultado, consulte la **pregunta 9** para obtener más información.

- 1 ¿Qué nivel de precisión tiene Clearblue® PLUS?**  
En pruebas de laboratorio, Clearblue® PLUS posee una precisión superior al 99 % cuando se usa a partir de la fecha en que debía tener el período.
- 2 ¿Cómo funciona Clearblue® PLUS?**  
Cuando está embarazada, su organismo produce la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hCG presente en su organismo aumenta en la etapa inicial del embarazo. Clearblue® PLUS puede detectar diminutas cantidades de esta hormona en la orina (la sensibilidad de esta prueba es de 25 mU/ml).
- 3 ¿Cuándo puedo utilizar Clearblue® PLUS?**  
Clearblue® PLUS puede usarse hasta 4 días antes de la ausencia del período. Si se realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período y obtiene un resultado de "No embarazada", aún existe la posibilidad de que esté embarazada. Consulte el cuadro que figura a continuación para ver los resultados de las pruebas clínicas de Clearblue® PLUS con muestras de embarazo anticipadas.

Pruebas Anticipadas	
Cantidad de días antes de la fecha prevista del período	% de muestras de embarazadas con resultado "Positivo"
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %


- 4 ¿Debo utilizar una muestra de la primera orina del día?**  
Si realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período, le recomendamos utilizar la primera orina del día. De lo contrario, puede realizarla en cualquier momento del día. Evite tomar una cantidad excesiva de líquidos antes de realizar la prueba.
- 5 No estoy segura de la fecha de mi próximo período. ¿Cómo puedo saber si estoy realizando la prueba en el momento indicado?**  
Para calcular la fecha en que debe tener el período, calcule la duración habitual de su ciclo al contar la cantidad de días desde el primer día de su período hasta el último día antes de iniciar el período siguiente.  
• Si tiene ciclos irregulares, debe dejar que transcurra una duración similar al ciclo más largo en los últimos meses antes de realizar la prueba.  
• Si no tiene idea de cuándo debería tener el período, le recomendamos realizar la prueba no menos de 19 días después de la última vez que tuvo relaciones sexuales sin protección.  
• Si el resultado es "No embarazada" y aún sospecha la posibilidad de un embarazo, consulte la **pregunta 13**.

- 6 ¿Existe algún medicamento o alguna enfermedad que pueda afectar el resultado?**  
• Siempre lea las instrucciones del fabricante de los medicamentos que consuma antes de realizar una prueba.  
• Los medicamentos que fomentan la fertilidad y contienen hCG pueden producir resultados engañosos (estos medicamentos para la fertilidad con frecuencia se administran de manera inyectable, y es posible que las pruebas realizadas poco tiempo después de la administración den un resultado "Positivo" falso).  
• Los demás tratamientos para la fertilidad (como el citrato de clomifeno), los analgésicos y los anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deben afectar el resultado.  
• Si dejó de utilizar anticonceptivos hormonales recientemente o utiliza tratamientos para la fertilidad como el citrato de clomifeno, es posible que sus períodos sean irregulares y que realice la prueba con demasiada anticipación.  
• Si estuvo embarazada recientemente (incluso si no llegó a término) puede obtener un resultado "Positivo" falso.  
• El embarazo ectópico, los quistes de ovarios, la menopausia y algunas afecciones médicas muy extrañas pueden producir resultados engañosos.  
• Si obtiene un resultado "Positivo", es posible que posteriormente descubra que no está embarazada debido a una pérdida natural del embarazo que puede ocurrir en las etapas iniciales.  
Si obtiene resultados inesperados, debe comentarlos con su médico.

- 7 Utilice la prueba de embarazo, pero la punta que cambia de color no se volvió completamente rosa. ¿Qué debo hacer?**  
Si la punta que cambia de color no se volvió completamente rosa, es posible que no haya aplicado una cantidad de orina suficiente. Sin embargo, si la línea azul de la ventana de control aparece en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que la prueba funcionó. Si no aparece ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, consulte la **pregunta 8**.

- 8 Utilice la prueba de embarazo, pero no apareció ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?**  
Si no hay ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que la prueba no funcionó. Esto puede ocurrir por las siguientes razones:  
• La punta que cambia de color no se mantuvo hacia abajo o la varilla de prueba no se apoyó sobre una superficie plana una vez que se aplicó la orina.  
• Se utilizó demasiada orina o muy poca. **Debe tomar la muestra durante 5 segundos.**  
Deberá realizar la prueba otra vez, con una nueva varilla de prueba, teniendo cuidado de seguir las instrucciones. Quizás desee recolectar una muestra de orina en un recipiente limpio y seco para, luego, sumergir solamente la punta que cambia de color durante 5 segundos.
- 9 ¿Qué hago si tengo dudas sobre el resultado?**  
• Para que el resultado sea "Embarazada", debe haber una línea azul en la ventana de control y un símbolo "+" en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. El aspecto del símbolo "+" en la ventana de resultado puede variar. Sin embargo, las líneas que forman el símbolo "+" y la línea de la ventana de control deben tener un ancho similar (consulte las figuras A-C).

- Figura A**  
Esto demuestra un resultado de "Embarazada". Esto es más probable si realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período, cuando sus niveles de hCG pueden ser relativamente bajos.
- Figura B**  
Esto no es inusual cuando está embarazada y realiza la prueba en la fecha en que debía tener el período o cerca de ella, ya que los niveles de hCG todavía pueden ser relativamente bajos.
- Figura C**  
Esto es más probable que suceda cuando está embarazada y realiza la prueba varios días después de la fecha en que debía tener el período, ya que los niveles de hCG son más altos.
- Si todavía no está segura del resultado, debe esperar por lo menos 3 días antes de realizar la prueba otra vez, teniendo cuidado de seguir las instrucciones.  
• Para que el resultado sea "No embarazada", debe haber una línea azul en la ventana de control y un símbolo "-" (menos) en la ventana de resultado en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba. Si el resultado es "No embarazada" y aún sospecha la posibilidad de un embarazo, consulte la **pregunta 13**.
- 10 ¿Qué podría afectar la precisión del resultado?**  
Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debe tener su período, la precisión de Clearblue® PLUS será menor. Si no toma una muestra de orina durante la cantidad de tiempo adecuada, es posible que no obtenga un resultado confiable. Sin embargo, siempre que vea una línea azul en la ventana de control dentro de los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, puede confiar en el resultado. Si continúa obteniendo resultados inesperados, debe consultar al médico. También, consulte la **pregunta 6**.
- 11 ¿Cuándo puedo leer el resultado?**  
El resultado de "Embarazada" puede aparecer en tan solo 1 minuto si realiza la prueba a partir de la fecha en la que debía tener el período (es decir, la fecha posterior al día en que debía tener el período, pero no lo tuvo). También, asegúrese de que haya una línea azul en la ventana de control antes de leer el resultado. **Debe esperar 3 minutos para confirmar un resultado de "No embarazada" o si realiza la prueba antes de la fecha en que debe tener el período. Si no aparece la línea azul en la ventana de control en 10 minutos, significa que la prueba no ha funcionado (consulte la pregunta 8).**
- 12 ¿Cuánto tiempo durará el resultado?**  
Puede leer el resultado en cualquier momento entre los 3 y 10 minutos después de la realización de la prueba. Después de 10 minutos, no se debe tener en cuenta ningún cambio en el resultado.
- 13 Mi prueba dice que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?**  
Es posible que no esté embarazada, que el nivel de la hormona del embarazo todavía no sea lo suficientemente alto como para detectarse, o que haya calculado mal la fecha en que debía tener el período.  
• Si se realizó la prueba con anticipación, vuelva a realizarla en la fecha en que debe tener el período.  
• Si su período está retrasado, vuelva a realizarse la prueba dentro de 3 días.  
• Si esta prueba le brinda un resultado "Negativo" y todavía no tuvo el período, consulte al médico.
- 14 Mi prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?**  
Si la prueba indica que está embarazada, debe consultar al médico, quien la asesorará sobre los próximos pasos que debe dar.



**www.clearblue.com**  
Clearblue Asistencia Lunes – Viernes 07:30 h. – 16:00 h. CST.  
**01- 800-083-0914**

Las llamadas desde algunos teléfonos móviles podrían incurrir en cargos.  
Por favor, compruebe las tarifas exactas de su operador de telefonía. Por favor, tenga el producto y la caja a mano cuando nos llame. Las llamadas son grabadas por motivos de capacitación y control de calidad.

Para conocer los siguientes pasos, así como también para obtener información y asesoramiento en general acerca de cuestiones relacionadas con el embarazo, visite nuestro sitio web en:  
**www.clearblue.com**

*Prueba de embarazo doméstica.  
Conserve a temperatura ambiente.  
Permita que el dispositivo alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba si éste fue conservado en refrigeración.  
Mantenga lejos del alcance de los niños.  
Solo para uso de diagnóstico in vitro.  
Deseche con los residuos domésticos habituales.  
No utilizar si el envoltorio está dañado.  
No utilizar si la varilla de prueba está vencida.*


LOT

Número de lote

IVD

Agente de diagnóstico

Fecha de caducidad


 Limite de temperatura  
De 2 °C a 30 °C

Fabricado por: Alere (Shanghai) Diagnostics Co. Ltd. 151 Libing Road China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 201203, China.  
Inverna Medical LLC, c. 569 Halls Mill Road, Freshold, NJ 07728, USA  
Para: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de Saint-Georges, 47, Petit-Lancy, CH- 1213 Ginebra, Suiza.  
Clearblue es una marca registrada. © 2019 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Todos los derechos reservados.  
Importado y distribuido por: Procter & Gamble México Inc. Avenida Tecojocotes S/N, Fraccionamiento Parque Industrial San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54769, Estado de México, México.

IVD